



Trasporto disabili



Trasporto disabili

Circolare 48/82

[...]

Comma 2. Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati deambulanti o non deambulanti su carrozzella, per un numero di posti complessivamente superiore alla metà di quelli disponibili, sono classificati come autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni. I posti restanti sono destinati in via principale ad eventuali accompagnatori e possono essere anche occupati da normali utenti, laddove non vi osti altra normativa. **La sistemazione interna di tali autoveicoli potrà non essere del tutto conforme a quanto previsto dalle norme in vigore per la categoria da cui derivano. Non sono comunque ammessi posti in piedi se non eccezionalmente per particolari necessita di assistenza degli handicappati.**

[...]

Circolare 48/82

Comma 5. [...]

- A. I sistemi di ancoraggio delle carrozzelle alle strutture della carrozzeria, dovranno essere fissati solidamente al veicolo e dovranno prevedere un sistema di blocco e sblocco di manovra facile e certa. Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g. [...]
- B. Le carrozzelle debbono essere provviste di idonee cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella. [...]
- C. I sedili per gli handicappati deambulanti devono avere in ogni caso dimensioni non inferiori a quelle prescritte per gli autobus e devono essere provvisti di cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella. Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g. [...]

Tipologie di sedie



Seggiolina da esterno



Seggiolina 10G

Seggiolina 10G

Carrozzina
dell'Associazione o
del paziente



**FARE INDOSSARE AL
PAZIENTE LE APPOSITE
CINTURE DI RITENUTA!**





Posizionare la
sedia sulla pedana



Ricorda sempre di
mettere il freno!

Seggiolina da esterno




Carrozzina
dell'Associazione o
del paziente



**FARE INDOSSARE
AL PAZIENTE LE
APPOSITE CINTURE
DI RITENUTA**



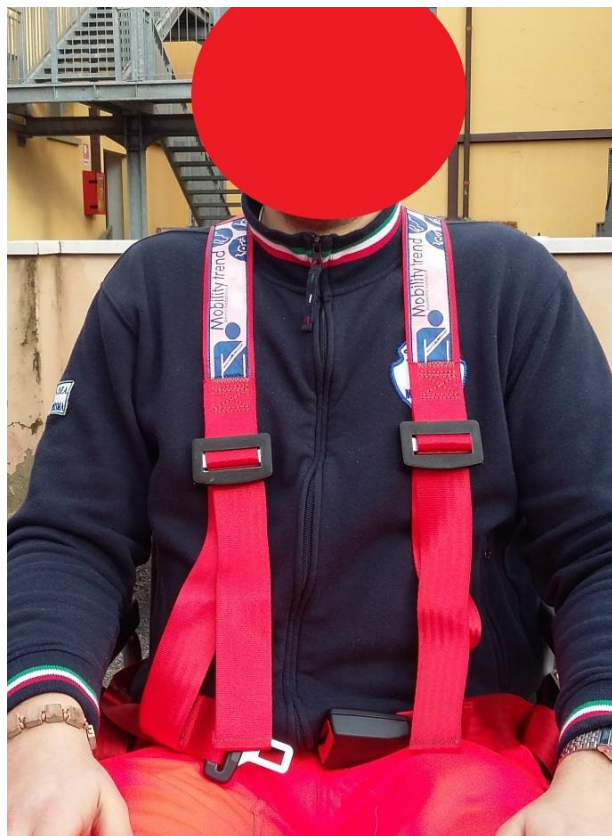


**FARE INDOSSARE
AL PAZIENTE LE
APPOSITE CINTURE
DI RITENUTA**





Chiudi la cintura

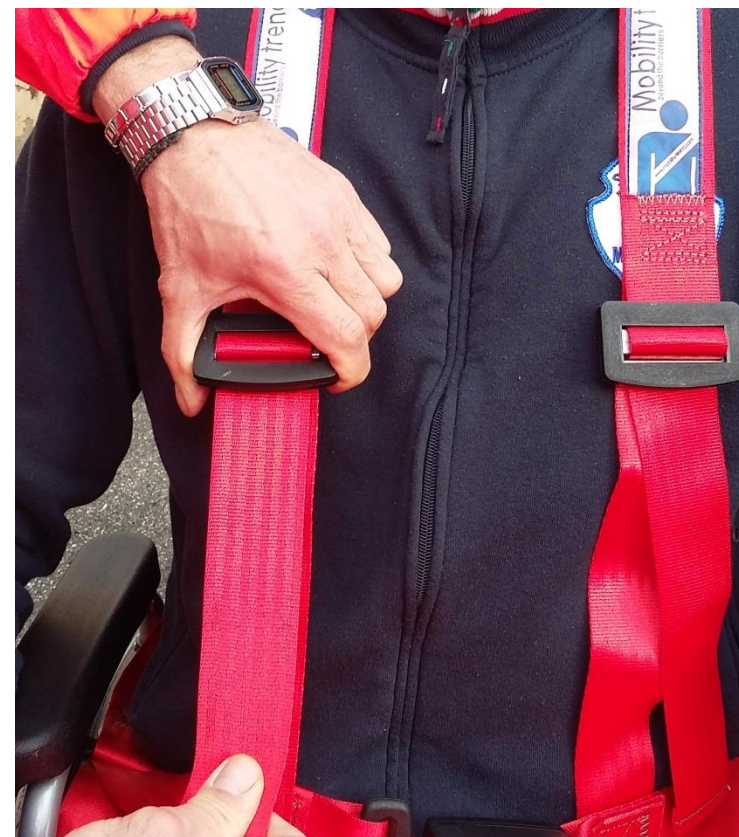

Regola la misura



Posiziona la carrozzina sulla pedana


Ricordati sempre il freno a entrambe le ruote



Posiziona la carrozzina
dentro al mezzo



Se necessario inserisci i
ganci per le cinture

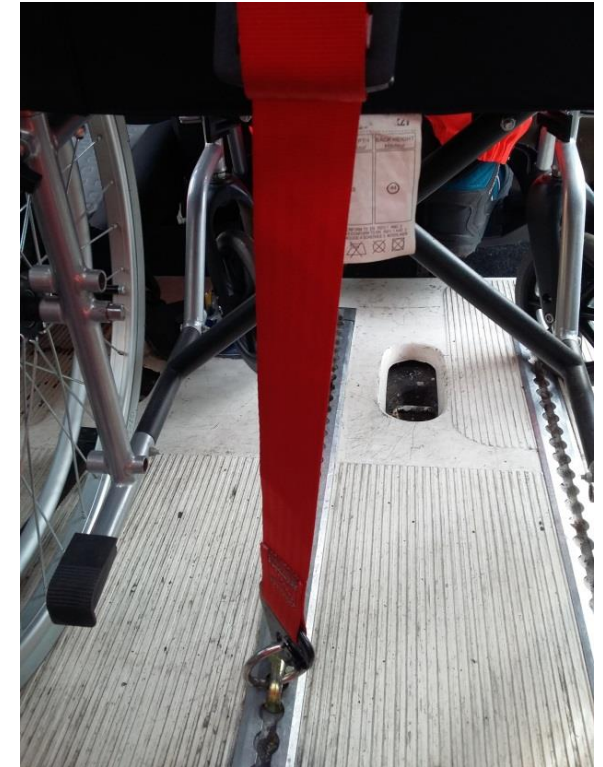

- **Vincola la sedia** a rotelle al mezzo attraverso le cinture da fissare alla carrozzina e ai ganci inseriti
- **Regola la tensione** delle cinghie e assicurati che la carrozzina non possa muoversi avanti e/o ruotare

Tipologie di pedane



Manuale



Elettrica



Pensa anche alla tua sicurezza e quella degli accompagnatori:

- Fai sedere solo nei posti predisposti
- Allaccia e fai allacciare le cinture di sicurezza a tutti i passeggeri



Ricorda:

- Fai indossare le bretelle di sicurezza
- Blocca la carrozzina con il freno
- Vincola la carrozzina al pavimento
- Blocca le bretelle di sicurezza al pavimento
- **SII PRUDENTE DURANTE LA GUIDA**

Una distrazione alla guida
può costare molto.



DOMANDE?

